



*Mobi-chair™ flotte mais ce n'est pas un bateau.  
La position assise est stable et vous ne risquez pas de glisser dans les conditions normales d'utilisation. Pour des raisons de sécurité, il est indispensable de toujours être accompagné lors de son utilisation, de porter un gilet de sauvetage et d'éviter la baignade si les courants et vagues sont forts.*



### LES AVANTAGES



- > Résistance à l'eau de mer et aux UV
- > Mobile
- > Flottant
- > Pratique & ergonomique
- > Sécurisant et résistant
- > Anti-corrosion
- > Pour les adultes comme pour les enfants
- > Circulation sur tout types de terrains et sols

## Spécificités techniques

Châssis repliable	Cadre en aluminium – fourche et visserie en acier inoxydable			
Dimensions de la Mobi-chair	Largeur	Longueur	Hauteur	Poids
	107 cm 42"	152 cm 60"	127 cm 50"	27kg 60 lbs
Dimensions du siège	Largeur	Longueur	Hauteur	Charge max
	46 cm 18"	43 cm 17"	48 cm 19"	136 kg 300 lbs
Dossier ajustable	3 positions : relaxation, promenade, baignade			
Couleur du siège	Bleu			
Tissu du siège	Résistant aux UV et à l'eau – ventilé – non allergène			
Accoudoirs amovibles	Plastique moulé – accoudoirs flottants détachables – basse pression			
Roues avant	30 cm x 16 cm   12" x 6" – basse pression – attache rapide			
Roues arrière	40 cm x 19 cm   16" x 7" – basse pression – attache rapide			

## Fauteuil polyvalent et de haute qualité



- > **3 roues** basses pressions antichoc
- > **Harnais de sécurité**



- > **Absorption des chocs** sur terrain irréguliers



- > **Stabilité maximale** avec accoudoirs flottants et pneus flottants

- > Poignées intégrées dans les accoudoirs assurent le **maintien**



- > Transport facile dans le coffre d'une voiture

## Installation rapide et faible maintenance

### INSTALLATION RAPIDE


Montage et démontage de Mobi-chair™ sans matériel et en moins de 10 minutes.

Intégralement pliable elle est facilement transportable et loge parfaitement dans le coffre d'une voiture.

### MAINTENANCE SIMPLE

Graissez régulièrement l'ensemble des bielles et vis de sécurité.

Après chaque utilisation, rincez Mobi-chair™ à l'eau douce afin d'éviter la corrosion et stockez-la dans un endroit propre et sec.

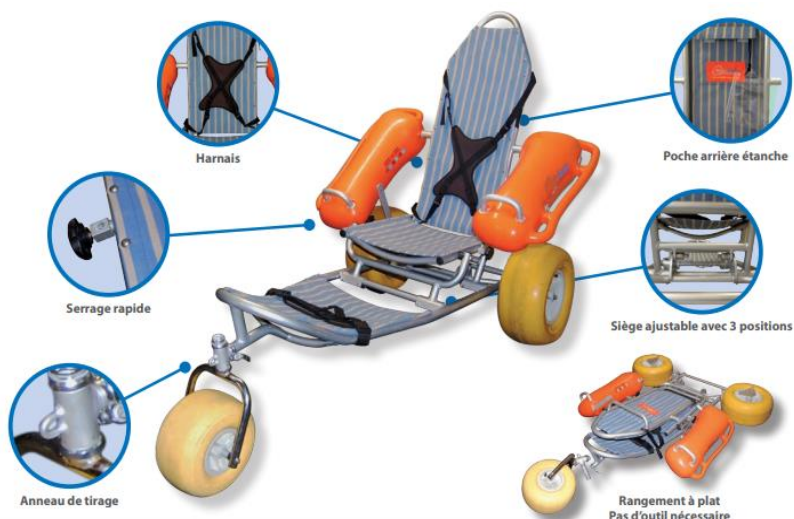

## Applications diverses et variées

### PLAGES & MERS



### Océans



### LACS



### PISCINES



## Quels sont nos produits complémentaires ?

### Mobi-mat® Tapis d'accès



### Mobi-roller™ Dérouleur de tapis



### Mobi-com™ Tapis de communication



### Mobi-fence™ Barrière anti-sable Tri-X



 [info@mobi-mat.com](mailto:info@mobi-mat.com)